

Kotproben richtig sammeln

Um die Kotproben in unserem Labor genau zu analysieren, benötigen wir **150 g Kot**, der nicht älter als 6 Stunden sein sollte.

Grundsätzlich reicht eine **1-Tages Probe** aus.

Wird allerdings **das erste Mal Beprobt**, oder ist ein **Bandwurmnachweis** erwünscht, benötigen wir eine **3-Tages Kotprobe**, um die Nachweischance zu erhöhen – hier kann zusätzlich ein doppeltes Bandwurmscreening (2x kombinierte Sedimentation/Flotation aus der Sammelprobe) zu einem noch besseren Nachweis führen.



Bestenfalls sammelst Du die 1-Tages Probe am Sonntag und die 3-Tages Probe am Freitag, Samstag und Sonntag. So kannst Du uns die Kotprobe am Montag zusenden und wir vermeiden Liegezeiten über das Wochenende beim Versanddienstleister.

Für das Versenden der Kotproben benötigst Du pro Kotprobe einen **Zip-Beutel**, den Du mit dem **Namen des Pferdes, des Besitzers und des Sammeldatums** gut lesbar beschriftest.

Bitte vermeide es, uns den Kot in Einmalhandschuhen zu schicken! Dies erschwert uns die Arbeit, da man meist die Beschriftung nicht lesen kann und das Herausnehmen des Kotes mit viel Aufwand verbunden ist.



Bild 1: ZIP-Beutel mit Beschriftung



Bild 2: Kotprobe NICHT im Handschuh

Im Menüpunkt „Anleitung & Downloads“ findest Du als Downloaddatei den dazugehörigen **Untersuchungsauftrag**, den Du in einer separaten Hülle den Kotproben gut leserlich beilegst.

Solltest Du das **erste Mal** Kotproben in unser Labor versenden bzw. ein **neues Pferd** zu Deinem Bestand hinzukommen, musst Du das Formular „Anamnesebogen“ zusammen mit der „Untersuchungsauftrag“ ausfüllen. Auch wenn Du gemeinsam mit Deinem Pferd schon bei uns registriert bist, musst Du bitte den Untersuchungsauftrag ausfüllen.

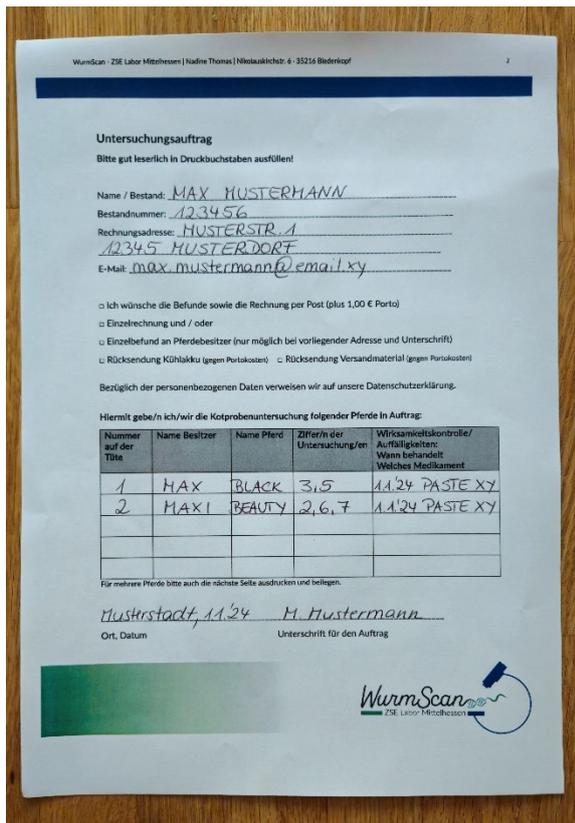


Bild 3: Ausgefüllter Untersuchungsauftrag

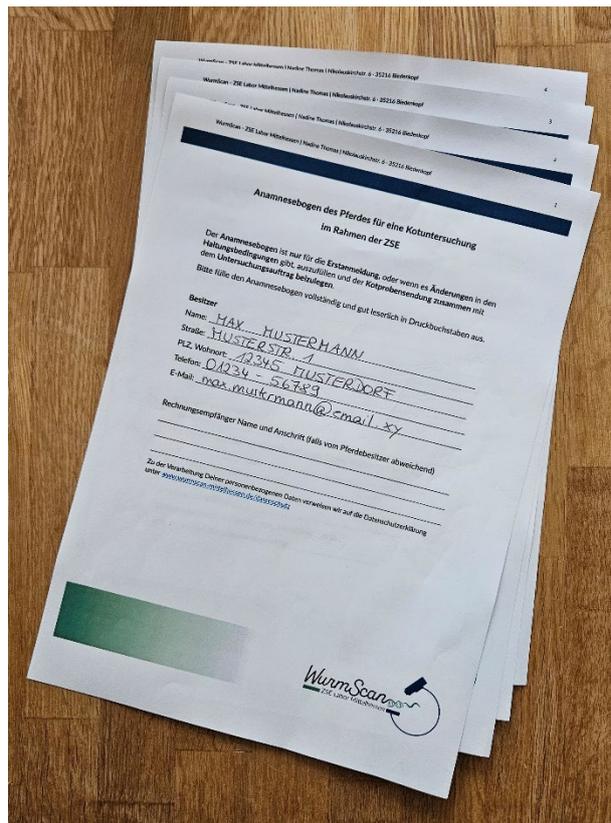


Bild : Ausgefüllter Anamnesebogen

Sollten zu Deinem Bestand mehrere Pferde gehören oder sammelst Du vielleicht für mehrere Pferde aus Deinem Stall, findest Du auch hierzu im Menüpunkt „Anleitung & Downloads“ die passenden Aufträge für mehrere Pferde.



Nachdem Du die Zip-Beutel beschriftet hast, **sammelst Du pro Kotprobe (1- oder 3 -Tages Probe) 150 g Kot.**



Bild 5: Richtige Kotprobenmenge

Bitte sammle keine Unmengen ein, denn auch wir müssen alles ordnungsgemäß entsorgen. Verschließe den Beutel gut (bitte **nicht** verknoten) und lege diesen nochmals in einen Beutel, um das Austreten der Sekrete während des Versandes zu verhindern.



Bitte **lagere** die Kotproben im **Kühlschrank**, um die Weiterentwicklung der Wurmeier zu verlangsamen. **Im Sommer** lege dem Paket einen **Kühlakku** bei. Diesen **wickelst** Du bitte in **Küchenrolle oder Zeitungspapier**, um ein Einfrieren der Kotproben zu vermeiden.



Bild 5: Richtiger Versand – Karton mit Untersuchungsauftrag, Anamnesebogen, Kühlakku und Kotprobe(n)

Sende die Kotprobe zusammen mit den Untersuchungsanträgen an folgende Adresse:

WurmScan
ZSE Labor Mittelhessen
Nikolauskirchstr. 6
35216 Biedenkopf

Bitte sende mir per **WhatsApp (0176 811 440 23)** oder **E-Mail (hallo@wurmscan.de)** eine **kurze Info**, dass Kotproben unterwegs sind.

Wer die **Proben** persönlich **vorbeibringen** möchte, kann sie in den Ablageraum am Haus legen. Schreibe mir eine kurze **Nachricht bei WhatsApp**, wenn Du die Probe abgelegt hast.



Bild 6: Ablageort neben dem Ausgang zur Haustür



Bild 7: Tür Ablageraum

So ist gewährleistet, dass die Proben noch am selben Tag in die Bearbeitung gelangen.

Je nach Untersuchung dauert es in der Regel ca. 3-5 Werktage, bis der Befund erstellt ist. Dieser wird dem Tierarzt vorgestellt und dann mit der Behandlungsempfehlung verschickt.

Klebestreifenabklatsch für Oxyurennachweis

Solltest Du den **Verdacht** eines **Oxyurenbefalls** haben, benötigst Du **Klebestreifen** (bspw. Tesafilm), einen **Objektträger** und einen **Umschlag**, den Du mit dem **Namen des Pferdes und des Besitzers** beschriftest. Den Objektträger bekommst Du in der Apotheke, im Internet oder direkt bei uns. Sprich uns einfach an.



Bild 8: Klebestreifenabklatsch auf Objektträger



Bild 9: Richtiger Versand – Abklatsch auf Objektträger mit beschriftetem Briefumschlag

Drücke den **Klebestreifen 1-2-mal** um die **gesamte Afterrosette** des Pferdes und klebe den Streifen bitte **faltenfrei** auf den **Objektträger**.

Füge diesen dem beschrifteten Umschlag bei und schicke ihn, zusammen mit dem **Untersuchungsauftrag**, der unter dem Menüpunkt „**Anleitung & Downloads**“ zu finden ist, an uns.